
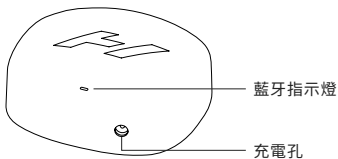


**Let's
get
started**

FI

如何使用 Venom 2

熱能震動器

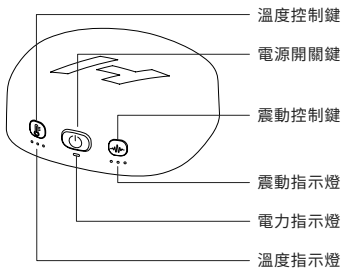

使用前請詳細參閱操作說明。

在開始使用前請先 下載 Hyperice App

透過 Hyperice App，讓您能夠更完整地使用您的 Venom 2 熱能震動器或是其他 Hyperice 的產品。您可以藉由 App 自由地控制溫度和震動模式，只需要開啟 App，即可自動連接您的產品，當連接成功時，藍牙指示燈將會亮起。




充電您的 Venom 2

將 Hyperice 充電器接上 Venom 2 並插入電源，
在第一次使用前，請充電至少 6 小時以完全充電。




啟動您的 Venom 2

請長按 1~2 秒電源開關鍵，即可開啟您的 Venom 2。

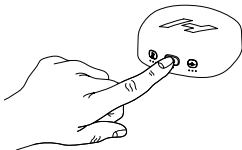

調整溫度

按下溫度控制鍵來選擇您所需的設定，每按一次即可調整一個等級，溫度指示燈將顯示等級（1~3）。

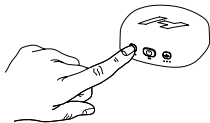

震動控制

按下震動控制鍵來選擇您所需的設定，每按一次即可切換至不同的震動模式，震動指示燈將顯示震動模式。


穿戴 Venom 2

Venom 2 可直接穿戴在裸露的皮膚上（溫度建議為 1 級），或是貼合在衣物上（不限溫度）。包覆需熱敷的部位，確認穿戴無誤，以能輕鬆調整控制器的位置為準。

設備會在 15 分鐘後自動關閉，如需繼續使用請再重新啟動。

充電


充電中的電力指示燈為緩慢閃爍狀態，充飽時則是持續亮著。請使用 Hyperice 的原廠充電器充電，請勿使用來路不明的充電器以避免毀損產品或釀成火災。

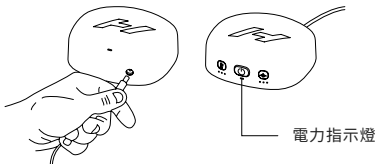

如何保養

請確保電源已關閉，且未連接充電器，使用濕布輕輕擦拭控制器和壓縮彈力布。

不使用時，請存放在乾燥、陰涼和通風的地方，避免陽光直射。

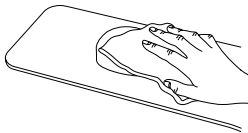

為您服務

如有任何操作上的疑問可以聯絡我們，將會有客服專員為您服務，也感謝您對本產品的支持！



(04)2386-1799



customer@ursasports.com



Hyperice 台灣官網：hyperice.com.tw



有熊運動官網：ursasports.com



@pfm2316u



客服時間：9:00 - 17:30 (週一~週五)