
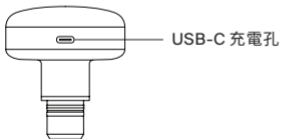


**Let's
get
started**

FI

如何使用 Heated Head

極速熱能按摩頭

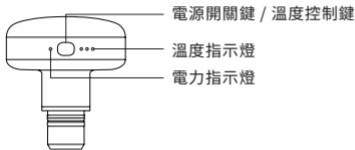

使用前請詳細參閱操作說明。


在開始使用前請先

充電您的

Heated Head 極速熱能按摩頭

將您的 Heated Head
連接 USB-C 傳輸充電線，
直到充電完畢。


電池充滿電最多可能需要
3 個小時。

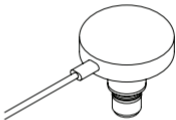

啟動您的 Heated Head


打開電源

啟動產品請按住電源開關鍵約半秒，直到電力指示燈 (LED 燈) 亮起，即可開啟您的 Heated Head。

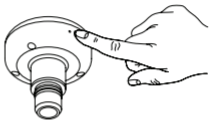


調整溫度

透過按下電源開關鍵 / 溫度控制鍵，每按一次就選擇一個等級，按鈕右側的溫度指示燈將顯示所選的溫度等級。

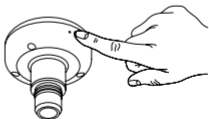

安裝 Heated Head

將 Heated Head 直接插入 Hypervolt 無線震動按摩槍的前端插槽，同時用力推入。

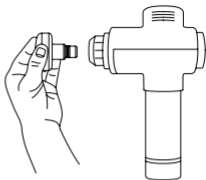

如何保養

請確保電源已關閉，且未連接充電線，使用濕布輕輕擦拭。不使用時，請存放在乾燥、陰涼和通風的地方，避免陽光直射。



為您服務

如有任何操作上的疑問可以聯絡我們，將會有客服專員為您服務，也感謝您對本產品的支持！



(04)2386-1799



customer@ursasports.com



Hyperice 台灣官網：hyperice.com.tw



有熊運動官網：ursasports.com



@pfm2316u



客服時間：9:00 - 17:30 (週一～週五)